


刺さらない『^{はり}鍼』です。

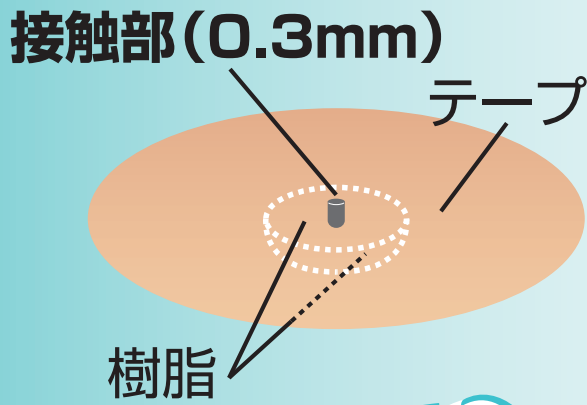

ご自宅でセルフケア
やさしい『はり』
やさしい『はり』

やさしい『はり』

SEIRIN[®]
MADE IN JAPAN

セルフで簡単ツボ療法
「はり」が苦手な方におすすめ

やさしい『はり』

気になる部分に
簡単・貼るだけ

滅菌済個包装
20本入

やさしい「はり」ごこち

■安全設計

個別包装され開封まで無菌維持された商品です。1枚のテープに接触部を樹脂で固定しているため、接触部が取れる心配はほとんどありません。

■衛生的

指がテープの粘着面に触れることがないように、独自の工夫を施しましたので、衛生的にご使用いただけます。

■皮膚にやさしい

テープは通気性の良い医療用テープを使用。ムレたり、かぶれたりすることが少なく、しかも剥がれにくいので、皮膚にぴったり密着します。

■品質管理

国内一貫生産のもと、ISO13485:2003を認証取得し、徹底した品質管理体制を確立しております。

使用上の注意

- 肌に傷、湿疹などのある所には使用しないでください。
- 目の周囲及び粘膜部分には使用しないでください。
- 一度使った本品を貼り直すとテープが剥がれやすくなります。貼り直しはしないでください。
- 入浴時は本品を外し、入浴後改めて新しい本品を貼ってください。
- 貼付した場所が発赤したり、カユミを感じるなど通常と異なる反応を示したり感じた場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
- 伸縮性に優れたテープではありません。テープがはがれやすくなる可能性がありますので貼る部分の筋肉、皮膚を伸ばした状態で貼るようにしてください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。

警告

- ご使用に際しては、添付文書をよくお読みください。

使用方法

1




無菌維持された個別包装のケースを1つ取りはずします。

2




シール紙をはがします。

3

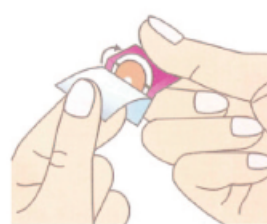

カートリッジを山折にします。

4

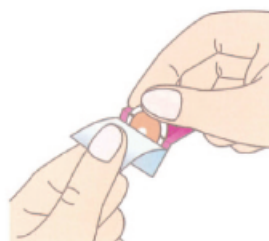

テープと共に剥離紙(扇形のシート)を指ではさみ、つまみあげてください。

5



剥離紙のついた状態で皮膚に貼付してください。

6



貼付後、残っている剥離紙を外し、上から軽く押さえて確実に貼付してください。

一般医療機器

医療機器届出番号：22 B1X 00006000007

一般の名称：非侵襲式家庭向け鍼用器具

販売名：やさしい「はり」ごこち

使用目的：身体に刺入せず皮膚に貼付する器具

入数：20本入

サイズ：0.3mm

接触部材料：ステンレス鋼線

製造販売業者：セイリン株式会社
静岡県静岡市清水区袖師町1007-1

お問い合わせ先：054-365-5380

受付時間 9時から17時まで
(土・日・祝日を除く)